

M-Core B-Li-HP

NAUDOTOJO VADOVAS



Made for

Apple iPhone | iPad | iPod

REXTON

TURINYS

Ižanga	4
Jūsų klausos aparatai	5
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	10
Funkcijos	10
Kasdienis naudojimas	11
Iškrovimas	11
Ijungimas ir išjungimas	12
Budėjimo režimo įjungimas	14
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	15
Garsumo nustatymas	17
Klausos programos keitimas	18
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	18
Ypatingos klausymosi sąlygos	19
Kalbant telefonu	19
Garso transliacija naudojant iPhone	20
Klausos aparatų lėktuvo režimas	20
Garso indukcinės kilpos	21

Techninis aptarnavimas ir priežiūra	22
Klausos aparatai	22
Į ausį kišamos dalys ir vamzdeliai	24
Specialistų atliekama techninė priežiūra	24
Svarbi informacija apie saugą	25
Tolesnė informacija	28
Informacija saugos klausimais	28
Priedai	28
Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	28
Informacija apie įrenginio likvidavimą	30
Šio dokumento simboliai	31
Trikčių diagnostika	32
Su šalimi susijusi informacija	33
Techninė priežiūra ir garantija	35

ĮŽANGA

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami savo klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

JŪSŲ KLAUSOS APARATAI



Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

PRIETAISO TIPAS

Jūsų klausos aparatai yra BTE (užausiniai) modeliai. Vamzdelis perduoda garsą iš klausos aparato į ausį. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Jis leidžia lengvai krauti naudojant mūsų standartinį įkroviklį arba pasirenkamą įkroviklį, Charging+ Station.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® low energy* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone**.

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

** iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

SUSIPAŽINIMAS SU KLAUSOS APARATU

Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.



Jeigu įsidėjus klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti savo klausos specialisto, ar aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

SUDEDAMOSIOS DALYS IR PAVADINIMAI

Jūsų klausos aparatai pritvirtinti prie už ausies tvirtinamo ragelio ir pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalies.



-
- | | |
|---|------------------------|
| 1 Už ausies tvirtinamas ragelis | 4 Įkrovimo kontaktas |
| 2 Mikrofono angos | 5 Šoninis indikatorius |
| 3 Klavišinis jungiklis (valdymas, įjungimo / išjungimo jungiklis) | |
-

Jūsų klausos specialistas prie kiekvieno klausos aparato prijungs už ausies tvirtinamą ragelį, vamzdelį ir pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis.

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys



Pavyzdžiai:



VALDIKLIAI

Naudodami klavišinį jungiklį galite, pvz., perjungti klausymosi programas. Klausos specialistas užprogramavo klavišiniam jungikliui jūsų pageidautas funkcijas.

Klavišinio jungiklio funkcijos	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:		
Programa aukštyn / žemyn	☐	☐
Garsumo didinimas / mažinimas	☐	☐
Spengimo ausyse funkcijos didinimas / mažinimas	☐	☐
TV transliacija įjungta / išjungta	☐	☐
Laikykite paspaudę ilgiau nei 3 sekundes:		
Ijungimas / išjungimas	☐	☐

L = į kairę, R = į dešinę



Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

KLAUSOS PROGRAMOS

1

2

3

4

5

6

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

FUNKCIJOS



Ūžesio šalinimo funkcija sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.



Aparatas turi įmontuotą **teleritę**, todėl galima jungtis prie indukcinų kilpų sistemų.

Daugiau skaitykite skyriuje „Garso indukcinės kilpos“.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Kad klausos aparatais būtų patogu ir paprasta naudotis, jie turi integruotą valdymo elementą. Be to, siūlome „Android“ ir „iPhone“ programėlę, kuri leidžia dar lengviau valdyti įrenginius. Norėdami atsisiųsti ir įdiegti išmaniojo telefono programėlę, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

ĮKROVIMAS

Galite rinktis iš dviejų įkroviklių: standartinį įkroviklį tik krovimui arba pasirenkamą įkroviklį, Charging+ Station.

Savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

- Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų krovimo patarimų.



PRANEŠIMAS APIE MAŽĄ ENERGIJOS KIEKĮ

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 20 minučių. Atsižvelgiant į klausos aparatų naudojimą, jiems įkrauti turite maždaug 1,5 val. – po to aparatai nustos veikti.

Turėkite omenyje, kad maitinimo elementas veikia trumpiau, jei vienu metu naudojama daug funkcijų.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- ▶ Įjungimas: Išimkite aparatus iš įkroviklio.

Jūsų klausos aparatuose leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- ▶ Išjungimas: Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.

Naudojant klavišinį jungiklį:

- Įjungimas: Nuspaudę laikykite klavišinio jungiklio apatinę dalį, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, atleiskite klavišinį jungiklį.



Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- Išjungimas: Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite viršutinę arba apatinę klavišinio jungiklio dalį. Pradės groti išjungimo melodija.



Taip pat žr. įkroviklio naudotojo vadove pateiktus krovimo patarimus.

BUDĖJIMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

Nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle savo klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba.

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jis vartoja šiek tiek energijos.
Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pultu ar programėlės naudoti negalite: klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (klavišiniu jungikliu arba trumpam įdėdami į įkroviklį, kol pradės šviesti vienas ar keli žali LED diodai). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

KLAUSOS APARATŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.



Klausos aparato įdėjimas:

- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies.
- ▶ Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ❶.
- ▶ Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.

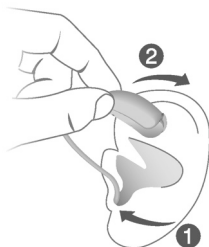

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ❷.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!


- ▶ Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešinijį** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairijį** – **kairiąja**.
- Jei dedant į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.

Klausos aparato išėmimas:

- ▶ Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkeltkite virš viršutinės ausies dalies ❶.
- ▶ Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies ir atsargiai ištraukite į ausį kišamą dalį ❷.

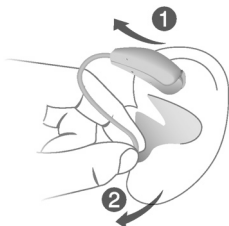

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir išdžiovinkite. Daugiau informacijos žr. skyriuje „Techninė priežiūra ir aptarnavimas“.

GARSUMO NUSTATYMAS

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jei norite reguliuoti garsą patys, paspauskite viršutinę klavišinio jungiklio dalį, kad pagarsintumėte, arba apatinę, kad patylintumėte.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

KLAUSOS PROGRAMOS KEITIMAS

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Jei norite pakeisti klausos programą, trumpai paspauskite klavišinį jungiklį.

Apie klavišinio jungiklio nustatymą žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

KITI REGULIUOJAMI NUSTATYMAI (PASIRINKTINAI)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užesio funkcijos lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

YPATINGOS KLAUSYMOSI SĄLYGOS

KALBANT TELEFONU

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



KALBĖJIMO TELEFONU PROGRAMA

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

GARSO TRANSLIACIJA NAUDOJANT IPHONE

Jūsų klausos aparatai yra **Made for iPhone** (pritaikyti iPhone) klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliepti į skambučius ir klausytis muzikos iš iPhone.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

KLAUSOS APARATŲ LĖKTUVO REŽIMAS

Lėktuvo režimas būna tuomet, kai klausos aparatų Bluetooth išjungtas. Vietose, kuriose Bluetooth technologiją naudoti uždrausta (pvz., kai kuriuose lėktuvuose), galite išjungti Bluetooth režimą. Tokiu būdu jūsų klausos aparatuose laikinai išjungiamas Bluetooth ryšys. Klausos aparatai veiks ir toliau be Bluetooth ryšio, tačiau tiesioginis garso perdavimas srautu ir kitos funkcijos neveiks.

- Norėdami įjungti arba išjungti Bluetooth režimą, naudokite išmaniojo telefono programėlę.

Apie išjungtą arba įjungtą Bluetooth režimą praneša įspėjamasis garsinis signalas.

GARSO INDUKCIŅĒS KILPOS

Kai kuriuose telefonuose ir viešosiose vietose, pvz., teatruose, galima garso signalo (muzikos arba kalbos) per garso indukcinę kilpą paslauga. Naudojant šią sistemą klausos aparatai tiesiogiai priima pageidaujamą signalą, bet aplinkos garsas neišskraipomas.

Jeigu naudojama garso indukcinės kilpos sistema, apie tai dažniausiai informuojama atitinkamais ženklais.



Kur bebūtumėte su garso indukcinė kilpa:

- Įjunkite teleritės programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar teleritės programa sukonfigūruota jūsų klausos aparatui.

TELERITĖS PROGRAMA IR NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS



PASTABA

Skirta tik belaidžio ryšio funkciją turintiems aparatams:

suaktyvinus indukcinės ritės (teleritės) programą, dėl nuotolinio valdymo pultelio gali būti girdimas ritmingas garsas.

- Naudokite nuotolinio valdymo pultelį didesniu nei 10 cm (4 col.) atstumu.

TECHNINIS APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

KLAUSOS APARATAI

VALYMAS

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galite sugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- ▶ Klausos aparatus valykite kasdien, švelniai ir sausu audiniu.
- ▶ Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- ▶ Valydami niekada nespauskite.
- ▶ Nenaudokite alkoholio pagrindo skiediklio įkrovimo kontaktams.
- ▶ Kad išvengtumėte korozijos naudokite minkštą ir sausą servetėlę prakaitui ar skysčiui nušluostyti nuo įkrovimo kontaktų arba klausos aparatų prieš įstatydami juos į įkroviklį.
- ▶ Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



DŽIOVINIMAS

Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovinti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

LAIKYMAS

- Trumpalaikis laikymas (iki kelių dienų). Klausos aparatus išjunkite klavišiniu jungikliu arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija.

Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiame nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai nėra **visiškai** išjungiami. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas (savaites, mėnesius ir t. t.). Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite jį klavišiniu jungikliu. Klausos aparatus laikant nenaudojamus, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje „Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

Į AUSĮ KIŠAMOS DALYS IR VAMZDELIAI

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė. Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.

Paprašykite klausos specialisto, kad išvalytų vamzdelius arba, jeigu reikia, pakeistų į ausį kišamas dalis ir vamzdelius.

Į AUSĮ KIŠAMŲ DALIŲ VALYMAS

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu.

Taip ausų siera neprisidžius ir nesukietės.

- Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite į ausį kišamos dalies į vandenį.

i

Pasirenkamas įkroviklis, Charging+ Station, valo UV spinduliais ir džiovina vamzdelius bei ausines, įkraudamas klausos aparatus.

Jei reikia daugiau informacijos, klauskite klausos specialisto, kuris variantas jums labiau tinka.

SPECIALISTŲ ATLIEKAMA TECHINĖ PRIEŽIŪRA

Klausos priežiūros specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą bei atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos priežiūros specialisto individualių rekomendacijų dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

SVARBI INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Šiame skyriuje pateikiama svarbi saugos informacija, susijusi su maitinimo elementu. Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su klausos aparatais pridedamą saugos instrukciją.



ĮSPĖJIMAS

Į jūsų prietaisą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Netinkamai naudojant prietaisą, įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojaus!

- ▶ Laikykitės šiame skyriuje pateiktų įkraunamų ličio jonų maitinimo elementų saugos nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Prijunkite įkroviklį naudodami tik USB maitinimo šaltinį, atitinkantį IEC60950-1 ir (arba) IEC 62368-1 reikalavimus.



ĮSPĖJIMAS

- ▶ Laikykitės naudojimo sąlygų.
- ▶ Būkite itin atidūs ir prietaisą saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės krosnelės ir kitų didelės indukcijos laukų) bei saulės šviesos.
- ▶ Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.
- ▶ Prietaiso neardykite.
- ▶ Prietaiso nenaudokite sprogioje aplinkoje.
- ▶ Nenaudokite deformuotų ar aiškiai pažeistų prietaisų.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei jo veikimas po krovimo labai suprastėja. Grąžinkite prietaisą savo klausos priežiūros specialistui.
- ▶ Neišmeskite prietaiso į ugnį arba vandenį.



ĮSPĖJIMAS

- ▶ Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas. Todėl:
- ▶ Neremontuokite ir nekeiskite įkraunamo ličio jonų maitinimo elemento patys.
- ▶ Jei mažai tikėtiniu atveju įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas sprogtų, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais grąžinkite prietaisus klausos priežiūros specialistui.

TOLESNĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA SAUGOS KLAUSIMAMS

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

PRIEDAI

Galite naudoti programėlę smartphone app, su kuria galite savo klausos aparatus patogiai valdyti nuotoliniu būdu. Naudodami programėlę taip pat galite išjungti signalinius tonus, kurti asmeninius garso profilius ir atlikti daugelį kitų funkcijų.

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

EKSPLOATAVIMO, TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklų).

Eksplotavimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Temperatūra	Nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)	Nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F)
Santykinis drėgnis	5–93 %	20–75 %

Eksplotavimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas.

	Laikymas	Transportavimas
Temperatūra (rekomenduojama)	Nuo 10 iki 25 °C (nuo 50 iki 77 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104 °F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140 °F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	Nuo 20 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 80 %	Nuo 5 iki 90 %
Atmosferos slėgis	Nuo 700 iki 1060 hPa	Nuo 700 iki 1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Klausos aparatus rekomenduojame įkrauti kas 3 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



ĮSPĖJIMAS

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojaus.

- ▶ Ličio baterijas ir klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių nuostatų.

INFORMACIJA APIE ĮRENGINIO LIKVIDAVIMĄ

- ▶ Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar klausos aparatų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- ▶ Maitinimo elementus ar klausos aparatus perdirbkite ar likviduokite laikydamiesi vietinių nuostatų.

ŠIO DOKUMENTO SIMBOLIAI



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.

Made for



iPhone | iPad | iPod

„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitikties. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Įkraukite klausos aparata.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaisys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Įkraukite klausos aparata.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Įkraukite klausos aparata.
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparata.
 - Įkraukite klausos aparata. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

SU ŠALIMI SUSIJUSI INFORMACIJA

JAV IR KANADA

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

M-Core B-Li-HP

- HVIN: RFM002
- Yra FCC ID: SGI-RFM002
- Yra IC: 267AB-RFM002

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR GARANTIJA

Serijos numeriai

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantija

[sigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas

 **Teisėtas gamintojas**

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Danija

Document No. 04510-99T01-8X00 LT

Order/Item No. 210 015 05

Master Rev01, 11.2020

© 01.2021, WSAUD A/S. All rights reserved

www.rexton.com

CE
0123